

**EN 1865**

[Fiche technique]

Chaise portoir d'ambulance Saver S-242

Réf. 503010

Certifiée conforme EN 1865, idéale pour les ambulances. Chaise portoir robuste et très facile à manipuler grâce à ses poignées avant et arrière ainsi que ses 4 roues à roulement à billes.

- Reconnue et considérée comme référence dans le monde de l'urgence, cette chaise portoir Ferno est à la fois économique et de grande performance permettant un déplacement aisé à toute épreuve même sur des sols irréguliers.
- Extrêmement maniable :
- Chaise portoir ambulance et d'escalier très facile à manipuler avec ses poignées avant et arrière, et ses 4 roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.
- 2 roues fixes à l'arrière.
- 2 roues pivotantes freinées à l'avant.
- 2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.
- Confort optimal du patient :
- 1 repose-pieds.
- Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.
- Facile et pratique d'utilisation :
- La toile de cette chaise ambulance est remplaçable et facilement lavable.
- Pliage et dépliage faciles en seulement 2 secondes avec un seul mouvement à une main.

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.


Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Caractéristiques produit	Dimensions : (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Structure aluminium anodisé Toile en vinyle orange enduit anti-feu M1 Sangles en nylon
Unité de vente	A l'unité
Poids	9,4 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (livrées montées)
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1 Conforme EN 1865-4-2012
Instructions d'utilisation	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Autres options disponibles	Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes : Réf. 503012 - Chaise S242 avec anneaux de portage Réf. 1844 - Bretelles de portage
Partie du corps	
Code SH	9402900000


Photos



chaise portoir ambulance ferno en 1865 avec charge maximum 250kg

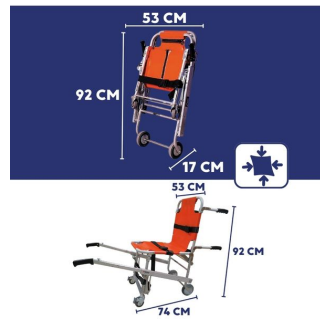

dimension chaise portoir

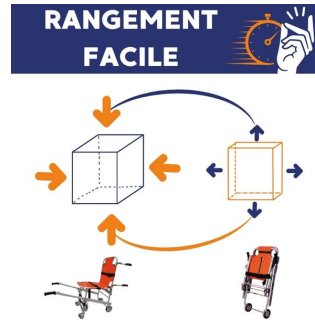

rangement facile de la chaise portable pliable



chaise portoir 3 sangles

NETTOYAGE



nettoyage de la chaise portoir