



[Fiche technique]

## Pansement hémostatique d'urgence QuikClot Combat Gauze

Réf. 304070

### Pansement coagulant hémostatique d'urgence conditionné scellé sous vide

Pansement Hémostatique d'Urgence QuikClot Combat Gauze

Le QuikClot Combat Gauze est un [pansement hémostatique](#) révolutionnaire conçu pour arrêter rapidement les saignements externes graves, même en situation d'urgence. Imprégnée de kaolin, une substance naturelle qui accélère la coagulation, cette bande de gaze permet de former rapidement un caillot sanguin directement sur la plaie, favorisant ainsi une hémostase efficace en quelques minutes. Conditionné sous vide et stérile, il est idéal pour les situations où chaque seconde compte.

### Pourquoi choisir QuikClot Combat Gauze plutôt qu'un autre pansement hémostatique ou une compresse standard ?

Contrairement aux pansements hémostatiques classiques, le QuikClot Combat Gauze utilise du kaolin, un agent qui déclenche immédiatement la coagulation sans réaction thermique, ce qui minimise les risques de brûlures ou d'inconfort pour le patient. Alors que les compresses standards ne servent qu'à exercer une pression physique sur la plaie, le QuikClot combine à la fois la pression et l'accélération biologique de la coagulation, rendant son action beaucoup plus rapide et efficace en situation d'urgence.

Points forts par rapport aux autres options :

- QuikClot vs Compresse Standard : Une simple compresse ne fait qu'absorber le sang. Le QuikClot, lui, active le processus de coagulation pour arrêter le saignement à la source.
- QuikClot vs autres pansements hémostatiques : Contrairement à d'autres produits qui peuvent générer de la chaleur ou nécessiter plusieurs étapes d'application, le QuikClot Combat Gauze est facile à utiliser et ne provoque pas d'effets secondaires thermiques.

Comment utiliser le QuikClot Combat Gauze : les bonnes pratiques

1. Préparez la zone de la plaie : Si possible, retirez les débris visibles et exposez la plaie pour un accès optimal.
2. Appliquez directement sur la plaie : Déroulez la bande de gaze QuikClot et pressez-la fermement sur la zone hémorragique. Si nécessaire, remplissez la cavité de la plaie avec la gaze pour maximiser l'efficacité du caillot.
3. Maintenez la pression : Exercez une pression continue pendant environ 3 à 5 minutes, ou jusqu'à ce que le saignement soit contrôlé. Le kaolin agira rapidement pour former un caillot solide.

4. Panser la plaie : Après arrêt du saignement, pansez la plaie en laissant la gaze en place. Celle-ci peut être retirée en toute sécurité ultérieurement, sans détruire le caillot formé.

### Efficacité prouvée du QuikClot Combat Gauze

Le QuikClot Combat Gauze a fait ses preuves sur le terrain, notamment dans les milieux militaires et de secours d'urgence, où sa capacité à stopper les hémorragies massives a sauvé des vies. Des études cliniques ont démontré que l'utilisation du kaolin permet de réduire significativement le temps de coagulation et de limiter les pertes de sang. Ce pansement est homologué par les forces armées américaines et utilisé dans de nombreux protocoles d'intervention médicale de premier secours à travers le monde.

### Caractéristiques supplémentaires :

- Imbibé de kaolin : Agent hémostatique naturel qui n'engendre aucune réaction thermique.
- Conditionnement sous vide : Stérile et compact, facile à transporter dans un kit de premiers secours.
- Retrait sans risque : Contrairement à d'autres pansements, le QuikClot peut être retiré sans risque de rouvrir la plaie ou d'endommager le caillot.

En résumé, le QuikClot Combat Gauze est un outil essentiel pour tout professionnel de santé, secouriste ou particulier souhaitant être préparé à intervenir rapidement face à des blessures graves. Avec son efficacité cliniquement prouvée, sa facilité d'utilisation et sa capacité à sauver des vies, il s'impose comme le choix de référence pour maîtriser les hémorragies sévères.

### Pourquoi utiliser ce produit en urgence ?

Le Coussin Hémostatique Coupe Hémato est conçu pour faciliter une intervention rapide et efficace face à une [hémorragie externe](#), en minimisant les risques de complications comme la surcompression ou le [garrot](#) artériel. Sa simplicité d'utilisation le rend accessible même aux non-professionnels formés aux premiers secours, et son conditionnement stérile assure une hygiène optimale. Idéal pour les trousseaux de premiers secours, ce dispositif est un allié précieux pour toute personne souhaitant être bien préparée à gérer une situation d'urgence.

### Pour qui est conçu ce produit ?

Ce coussin hémostatique est idéal pour :

- Les secouristes et services d'urgence : Il permet de gagner du temps précieux en arrêtant rapidement le saignement sans avoir à maintenir manuellement une pression sur la plaie.
- Les entreprises et lieux à risques : Ce coussin est un indispensable pour les industries, chantiers, ou tout lieu où des blessures graves peuvent survenir.
- Les particuliers : Amateurs de sports extrêmes, randonneurs ou toute personne souhaitant renforcer leur trousse de secours, le Coussin Hémostatique Coupe Hémato est un choix sûr et efficace.

## Informations complémentaires

6 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide.

Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes.

DéTECTABLE aux rayons X.

Pliage en Z pour un dépliage facile.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Quikclot
<b>Dimensions</b>	(IxL) 7,6 cm x 3,65 m (déplié)
<b>Caractéristiques produit</b>	6 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide. Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes. Durée de vie : 5 ans. Scellé sous vide.
<b>Couleur</b>	Ecrue, Bleu
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	22.7 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	Placez la gaze QuikClot sur la plaie et utilisez-la pour exercer une pression directe sur la source du saignement. Au contact de la plaie, ce pansement hémostatique déclenche et accélère la coagulation du sang dans le but de contrôler rapidement l'hémorragie. Lorsqu'il est en place, il suffit d'appliquer une compression de quelques minutes. Bandez la plaie pour maintenir la pression (avec un pansement compressif par exemple). Faites immédiatement appel à un médecin.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2b
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3005901000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	200
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Pansement hémostatique QuikClot Combat Gauze pour hémorragie externe




Comment utiliser QuikClot Combat Gauze ?



Dimensions QuikClot Combat Gauze



Péréption et garantie QuikClot Combat Gauze

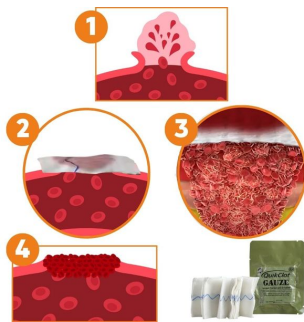

Mécanisme coagulation du pansement hémostatique d'urgence QuikClot Combat Gauze